


3.2 **A/C** または **SIMV** のうち設定する方の項目にスクロールして **選択** ツマミを押します

現在モード: PCV-AC      通常運転      警報音入

SIMV      A/C

圧トリガー      流量トリガー

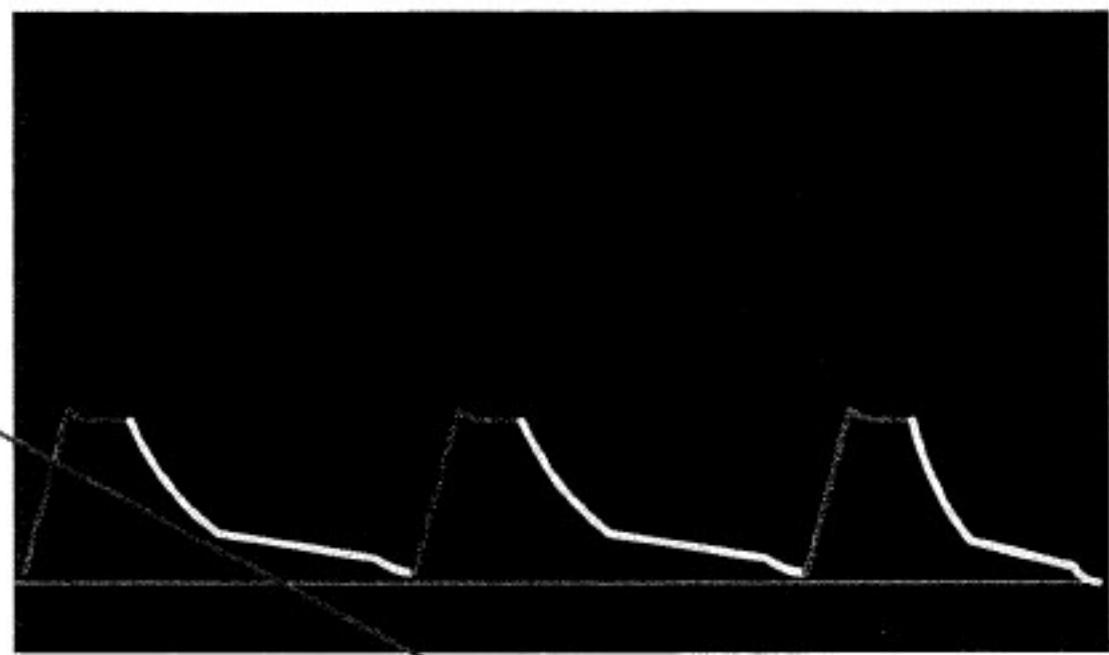

ライズタイム      0.1      sec

呼気認識      25      %

アプネア換気回数      20      BPM

プラトー      0.0      sec

IMV患者データ

最大吸気圧	9.1	cmH2
平均気道圧	4.3	cmH2
換気回数	20	BPM
分時換気量	3.31L	
一回換気量	166mL	

スクロールして選択

IMV設定      IMV警報      IMVデータ      波形      ループ      HFO